

PROBLEMET

Varför du måste hålla rent mellan tänderna

Visste du att hälften av alla bakterier finns kvar när du borstat tänderna? De finns kvar mellan tänderna på de interdentala tandytorna. Bakterier som tillsammans med bl.a. saliv och matrester skapar beläggningar på svåråtkomliga gömställen dit tandborststrån inte kommer åt att rengöra. Beläggningar som ger hål i tänderna, karies, och som om de inte borstas bort orsakar inflammation i tandkötet, s.k. gingivit.




Med tiden förkalkas dessa beläggningar till tandsten. I många fall kan tandstenen påskynda att tandköttsfickorna fördjupas och inflammationen börjar sprida sig på djupet, vilket leder till tandlossning s.k. parodontit. Parodontit är vanligare än man kan tro. Tandlossning drabbar 7 av 10 över 35 år.

För att förebygga karies och tandlossningssjukdomar måste man därför komplettera den regelbundna tandborstningen med att noga göra rent mellan tänderna med ett effektivt och lättanvänt hjälpmedel som Flossbrush. Använd Flossbrush dagligen och komplettera gärna med tandtråd där så behövs. Med Flossbrush håller du enkelt rent också om du har tandställning, bryggor eller implantat.

DAGLIG TANDVÅRD

Flossbrush rengör enkelt och tillför skyddande fluor

Tänk dig Flossbrush som en liten miniatyrtandborste som du använder för rengöring och massage i det svåråtkomliga och känsliga området mellan tänderna på de interdentala tandytorna.

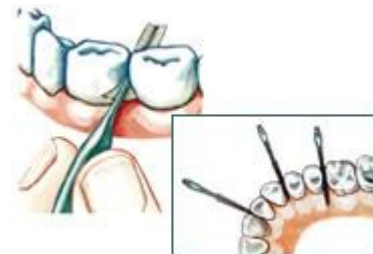

För in Flossbrush försiktigt i tandmellanrummet med den flata sidan mot tandkötet. Massera försiktigt fram och tillbaka några gånger, så borstar du bort resterande plack från tändernas s.k. distala och mesiala ytor.

Enklare kan man inte göra rent mellan tänderna.



Flossbrush form och spets gör att en och samma kommer åt att rengöra i alla mellanrum.

För att dagligen stärka tandens emalj mot kariesangrepp har varje Flossbrush försetts med 0.25 mg fluor som utsöndras gradvis när du masserar mellan tänderna. Flossbrush och fluor är förbrukad efter ca 2 minuters användning. Den tid det beräknas ta för dig att rengöra alla mellanrum med Flossbrush.

Flossväven som innehåller fluor är integrerad som en del av stickan och kan därför ej lossna. Flossbrush innehåller inga metalldelar som kan skada tandkött, emalj, kronor eller

implantat.

SPECIELL TANDVÅRD

Flossbrush rengör
skonsamt runt brygga,
implantat och
tandställning



Rengör effektivt runt
implantat, repar inte det
höglanspolerade titanet
och kan böjas för bättre
åtkomlighet runt hela
implantatet.



Rengör hela vägen mellan
bryggfästena och på
sidorna av tänderna där
bryggan är fastsatt.



Hanterbar och lättåtkomlig
rengöring runt och mellan
tandställningens
fästpunkter (barn med
utvecklade permanenta
tänder skall undvika att
använda Flossbrush).


STÖDBEHANDLING

Flossbrush som applikator vid antibakteriell behandling



*Stryk på lösningen på flossen med
stickans flata sida riktad ifrån
påstrykaren.*

Din tandläkare och tandhygienist rekommenderar ibland
stödbehandling där du dagligen skall applicera skyddande
lösningar på vissa karies- och infektionskänsliga ytor. Vanliga
lösningar, antingen i flytande eller gelform, är t.ex. klorhexidin
och fluor. Stryk på eller doppa lösningarna på en Flossbrush.
Massera in lösningen på förevisad tandyta med hjälp av
Flossbrush.

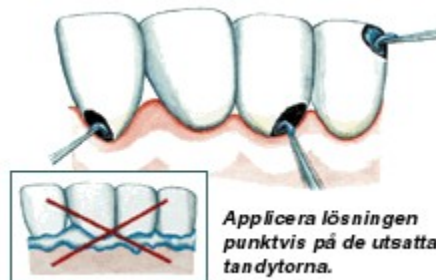

*Applicera lösningen
punktvis på de utsatta
tandytorna.*