

## Att använda kondom

Öppna förpackningen som teckningen visar. Använd inga skarpa föremål. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på.

Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Före nära kontakt med din partner, dra tillbaka förhuden och rulla på kondomen försiktigt så den inte rispar av naglarna.

Direkt efter utlösningen drar du långsamt ut din penis och håller kondomen noga på plats så att ingen sperma rinner ut.



Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar.

När du använder extra glidmedel ska det vara vatten- eller silikonbaserat t ex RFSU Klick. Använd inte oljebaserat glidmedel som t ex barnolja eller vaselin.

Rådfråga läkare eller apotek innan kondom används med salva eller vagitorier för medicinerig.

RFSUs kondomer håller högsta kvalitet, kontrolleras och testas enligt RFSU normen som tillhör världens strängaste.

Överskottet från all försäljningen går till information och utbildning i sex- och samlevnadsfrågor, både i Norden och internationellt.



Art.nr. 10801XN

## Å bruke kondom

Pakningen åpnes som vist på tegningen. Bruk ingen skarpe gjenstander. Behandle kondomet varsomt, slik at det ikke skades av negler, smykker e.l. Rull først ut kondomet et stykke, slik at det tydelig vises hvilken vei den skal rulles på.

Klem luften ut av kondomet med tommel og pekefinger. Trekk forhuden tilbake og rull på kondomet før det etableres fysisk kontakt med partneren. Unngå å rispe kondomet med neglene eller andre gjenstander.

Rett etter utløsningen drar du penis langsomt ut og holder kondomet nøyte på plass, slik at sæden ikke renner ut.



Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter deg mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner.

Når du benytter glidemiddel skal det være vannbasert eller silikonbasert, som for eksempel RFSUs Klick. Bruk ikke oljebasert glidemiddel som for eksempel babyolje, vaselin osv.

Spør din lege eller apoteket hvorvidt kondomer kan benyttes sammen med salve eller vagitorier.

RFSUs kondomer er av høyeste kvalitet, og kontrolleres og testes i henhold til RFSU normen som er en av verdens strengeste.

Overskuddet fra salget går til informasjon og utdanning i sex- og samlivsspørsmål, både i Norden og internasjonalt.

## Anvendelse af kondom

Emballagen åbnes som vist på tegningen. Anvend ikke nogen skarpe genstande. Hånder kondomet forsigtigt, så det ikke bliver beskadiget af negler, smykker osv. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på.

Klem luften ud af kondomets reservoir, med tommel- og pegefingert. Træk forhuden tilbage og rul kondomet på den erigerede penis, før der etableres fysisk kontakt med partneren. Undgå at rive kondomet på negle eller andre genstande.

Straks efter udløsningen trækker du langsomt penis ud, mens du holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud.



Kondomet er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme.

Når du bruger glidecreme, skal den være vandbaseret eller silikonebaseret, f.eks. RFSUs Klick. Brug ikke oliebaserede glidecremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign.

Spørg din læge eller apoteket til råds om, hvorvidt kondomer må anvendes sammen med salve eller vagitorier (indføring af kapsel i skeden).

RFSUs kondomer er af højeste kvalitet og kontrolleres efter RFSUs egne standarder, som er blandt verdens strengeste.

Overskuddet fra salgskaktiviteterne går til information og oplysning om sex- og samlivsspørsmål, både i Norden og internationalt.

**Tillverkare/Producent/Produsent/Valmistaja:**  
RFSU AB, Box 1279, 164 29 Kista, Sweden  
www.rfsu.com

## Näin käytät kondomia

Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti, älä käytä teräviä esineitä. Pyöritä kondomia hieman auki nähdäksesi, että se tulee oikeinpäin.

Purista peukalolla ja etusormella ilma kondomin kärkestä. Vedä esinahka taakse ja pyöritä kondomi paikoilleen ennen intiimiä ihokontaktusta. Varo raapimasta kondomia kynsillä.

Ota penis hitaasti pois heti siemensyöksyn jälkeen. Varmista, että kondomi pysyy paikoillaan eikä spermaa pääse valumaan ulos.



Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että sukupuoliteitse tarttuvilta taudelta.

Kun käytät liukuvoidetta, on sen oltava vesipohjaista kuten RFSU Klick. Älä käytä öljypohjaisia aineita kuten vaseliinia, lastenvoidetta tai ihovoidetta.

Älä käytä kondomia lääkehoitoon tarkoitettujen voiteiden tai emätinpuikkojen kanssa. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai aptekin puoleen.

RFSU-kondomien kestävyyttä ja korkeaa laatua valvotaan ja testataan maailman tiukimpiin kuuluvan RFSU-normin mukaisesti.

Myyntivaitto ohjataan seksuaaliasiointia ja yhteiselämää koskevaan, sekä Pohjoismaissa että maailmalla tapahtuvaan valistukseen ja tiedottamiseen.

**Importør/Maahantuaja:**  
RFSU Norge AS, Oslo  
Valora Trade Danmark A/S, Herlev  
Suomen RFSU Oy, Vantaa/Vanda



## PROFIL/MAGIC



**SE.** RFSU Profil/Magic är kondomer med insvängd topp för bäst passform och ökad känsla. Ofärgad, profilerad latexkondom med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 53 mm.

**NO.** RFSU Profil/Magic er kondomer med innsvingt tupp for bedre passform og økt følsomhet. Ufarvet, profilert latexkondom med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 53 mm.

**DK.** RFSU Profil/Magic er kondomer med indsnævret top, som giver perfekt pasform og øger følelsen. Ufarvet, profileret latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 53 mm.

**FI.** RFSU Magic/Profil -kondomit puristavet parhaasta paikasta ja tuntuvat hyvältä. Väritön, kostea ja muotoiltu sileäpintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 53 mm.

## NÄKKEN



**SE.** RFSU Näkken är kondomer med knottor på för ökad njutning och gör det skönare för båda. Ofärgad, profilerad latexkondom med knottig yta, behållare och glidmedel. Bredd 53 mm

**NO.** RFSU Nøkken er kondomer med knudrer som gir økt nytelse for begge. Ufarvet, profilert latexkondom med knudrete overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 53 mm.

**DK.** RFSU Nøkken er kondomer med knopper, som øger nydelsen og gør det skønnere for begge parter. Ufarvet, profileret latexkondom med nopret overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 53 mm.

**FI.** RFSU Näkken -kondomien juomupinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen. Väritön, kostea ja muotoiltu juomupintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 53 mm.

## THIN



**SE.** RFSU Thin är tunna kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. Ofärgad, profilerad latexkondom med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 53 mm

**NO.** RFSU Thin er tynde kondomer for en nærmere følelse, nesten som uten. Ufarvet, profilert latexkondom med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 53 mm.

**DK.** RFSU Thin er tynde kondomer, som giver en tættere følelse, næsten som ikke at have noget på. Ufarvet, profileret latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 53 mm.

**FI.** RFSU Thin -kondomit ovat ihonohuita, lähemmäksi et pääse. Väritön, kostea ja muotoiltu sileäpintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 53 mm

## GRANDE




**SE.** RFSU Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. Ofärgad latexkondom med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 53 mm

**NO.** RFSU Grande er ekstra romslige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse. Ufarvet latexkondom med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 53 mm.

**DK.** RFSU Grande er ekstra rummelige og sikre kondomer i stort format, som giver en bedre pasform og øget følelse. Ufarvet latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 53 mm.

**FI.** RFSU Grande -kondomit ovat tositilavia ja varmoja. Suora muoto sopii aina. Väritön, ja kostea sileäpintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 53 mm

## ROYAL

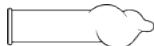

**SE.** RFSU Royal är kondomer med generös passform och spiralformad topp som stimulerar extra känsliga områden – twist & shout! Ofärgad latexkondom med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 51 mm

**NO.** RFSU Royal er kondomer med generøs passform og spiralformet tupp. Stimulerer ekstra følsomme områder – twist & shout! Ufarvet latexkondom med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 51 mm.

**DK.** RFSU Royal er kondomer med god pasform og spiralformet top, som stimulerer de ekstra følsomme områder – twist & shout! Ufarvet latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 51 mm.

**FI.** RFSU Royal -kondomien suoraa muotoa täydentää herkimpiä alueita kiihottava spiraalinmuotoinen kärkiosa – twist & shout! Väritön ja kostea sileäpintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 51 mm

## EASY




**SE.** RFSU Easy är raka kondomer med en passform som gör den lättare att rulla på. Rak, ofärgad latexkondom med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 53 mm

**NO.** RFSU Easy er rette kondomer med en passform som gjør dem lettere å rulle på. Ufarvet latekskondom med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 53 mm.

**DK.** RFSU Easy er lige kondomer med en pasform, som gør dem lettere at rulle på. Ufarvet, lige latexkondom med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 53 mm.

**FI.** RFSU Easy -kondomit ovat suoria ja ne on helppo panna paikoilleen. Väritön, kostea, suora ja sileäpintainen lateksikondomi säiliöllä. Leveys 53 mm

## ZENITH

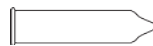

**SE.** RFSU Zenith är extra tunna och luktfria plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. Ofärgad, rak latexfri kondom (polyuretanplast) med slät yta, behållare och glidmedel. Bredd 58 mm

**NO.** RFSU Zenith er ekstra tynde og luktfrie plastkondomer som leder kroppsvärme og gir en naturlig følelse. Kan benyttes af latexallergikere. Ufarvet, rett latexfri kondom (polyuretanplast) med glatt overflate, beholder og glidemiddel. Bredd 58 mm.

**DK.** RFSU Zenith er ekstra tynde og lugtfrie plastkondomer, som leder kroppsvärmen og giver en naturlig følelse. Kan bruges af latexallergikere. Ufarvet, lige latexfrit kondom (polyuretanplast) med glat overflade, reservoir og glidecreme. Bredd: 58 mm.

**FI.** RFSU Zenith -kondomit ovat erittäin ohuita ja hajuttomia. Ne välittävät kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopivat myös kumi- ja lateksiallergoille. Väritön, kostea, suora ja sileäpintainen kondomi säiliöllä. Valmistettu polyuretaanimuovista (ei sisällä lateksia). Leveys 58 mm

## 17006



**SE.** Transparent, rak och slät kondom utan behållare. Bredd 52 mm.

**NO.** Transparent, rett og glatt kondom uten beholder. Bredd 52 mm.

**DK.** Transparent, lige kondom uten glidecreme. Glat overflade. Bredd 52 mm.

**FI.** Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä. Kuiva ja sileä pinta. Leveys 52 mm.